



FDA ISO MDSAP
REGISTERED FACILITY 13485
MEDICAL DEVICE MANUFACTURING




AEGIS LIFESCIENCES

VÉDELEM A TÖKÉLETESSÉGEN KERESZTÜL



h y p p o l a b o r

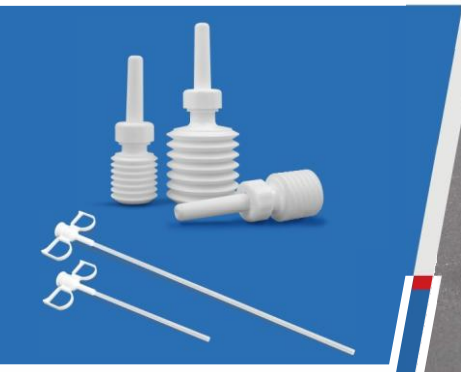

SURGISPON®

Felszívódó vérzéscsillapító
zselatinszivacs por



SURGISPON[®]

Felszívódó vérzéscillapító
zselatinszivacs por

A SURGISPON[®] abszorbálható vérzéscillapító zselatinszivacs por használható a heves és diffúz vérzések gyors vérzéscillapítására – még a nehezen elérhető műtéti helyeken és területeken is. A módosított zselatin alapú, abszorbálható, természetes polimer részecskés por felgyorsítja a véralvadási folyamatot, így 2 percen belül gyorsan és hatékonyan elérhető a


FŐBB ELŐNYÖK

- Természetes, biztonságos és biokompatibilis, természetes véralvadáserkentő hatással
- Könnyen alkalmazható nagy felületeken és szabálytalan felületeken
- Hatékonyan állítja el a vérzést, és a vérzéscillapítás ideje jelentősen rövidebb, mint más vérzéscillapító porok esetében
- Nem hagy üregeket a véralvadék és a szöveti felületek között
- Jobb mechanikai integritás a vérrögben, több fibrinmátrixot biztosítva a vérrögökben
- Jobb vérfelvívő képesség, mint más vérzéscillapító poroknál, jelentősen alacsonyabb újrávérzés kockázattal
- Magasan tisztított, gyógyszerészeti minőségű zselatinból készül
- pH-semleges, szükség szerint gyógyszerekkel kombinálható
- Gyors, teljes felszívódás
- Kapilláris, vénás és arterioláris vérzések esetén javallott
- Nincs kockázata a kapszulázódásnak és a túladagolásnak
- Antikoaguláns terápiában részesülő betegeknél is alkalmazható.






1.

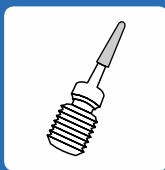

2.

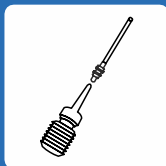

3.



4.

FÚVÓKA ELŐKÉSZÍTÉS

1.

Vizuálisan ellenőrizze mind a poros tölcserőt, mind az applikátor csomagolását, hogy nem nyíltak-e meg korábban, vagy nem sérültek-e meg. Ha bármilyen problémát észlel, kérjük, cserélje ki új csomagokra.

2.

Nyissa ki a poros palack csomagolását úgy, hogy elforgatja és letöri a kupakot.

3.

Csatlakoztassa a poros palackot az adagoló csatlakozójához úgy, hogy az adagolót erősen megnyomja és elforgatja (2-3-szor az óramutató járásával ellentétes irányba), hogy a poros fúvóka és az adagoló csatlakozója jól illeszkedjen egymáshoz.

4.

Nyomja meg az adagolót, hogy a por közvetlenül a vérzés helyére kerüljön. Javasoljuk, hogy a rendszert tartsa a lehető legfüggőlegesebb helyzetben a por sima és pontos kibocsátása érdekében. A rendszer most már használatra kész.

ALKALMAZÁSI TECHNIKA



- Törölje le, itassa fel vagy szívja le a felesleges vért a kezelendő helyről. A felesleges vér eltávolítása lehetővé teszi, hogy a SURGISPON® por közvetlenül érintkezzen a helyszínnel
- Azonnal vigyen fel bősséges mennyiségű SURGISPON® port
- Erős vérzés esetén száraz borogatással gyakoroljon mérsékelt nyomást a vérzés forrására. A géz óvatos eltávolítása előtt ajánlott sóoldattal öblíteni a területet
- A kompresszum eltávolítása előtt nedvesítse meg steril sóoldattal
- Ha a vérzés folytatódik, távolítsa el a felesleges részecskéket, és ismételje meg az eljárást.

A rendelési információk az utolsó oldalon találhatóak

SURGISPON[®]

FELSÍVÓDÓ VÉRZÉSGÁTLÓ ZSELATINSPONGE POR ELŐRE TÖLTÖTT FECSKENDŐ



A SURGISPON[®] vérzéscsillapító por előretöltött fecskendő készlet egy steril, felszívódó zselatinszivacs por, amelyet előretöltött fecskendő készletben szállítanak, és amelyet vérzéscsillapításra szánnak, különösen nehezen elérhető helyeken.

FŐBB JELLEMZŐK

- A sóoldattal/trombinnal való keverés után az alkalmazás kezdetétől a végéig egyenletes viszkozitást biztosít
- A steril sóoldat/trombinnal való egyenletes keverés után 30 másodperc alatt használatra kész
- A készítmény elkészítése után (az alábbi utasítások szerint) beborítja a vérző helyet, hogy gyorsabban elállítsa a vérzést. Hatékonysága, biztonságossága és eredményessége bizonyított a vérátömlesztések, a kisebb és nagyobb szövődmények, valamint a műtéti beavatkozások során
- A sóoldattal/trombinnal való keverés után is a helyén marad az aktív vérzés során, és gyorsabb vérzéscsillapítást biztosít a kívánt helyen
- Könnyen használható, és helyileg alkalmazható a vérzés célterületén.

A rendelési információk az utolsó oldalon találhatóak

Egy üres fecskendő a stixing sterilizálásához

SURGISPON® Felszívóképes Haemostatic Gelatin Sponge Powder

Luer csatlakozó

Folyadékátadó pohár

Egy applikátor hegy



VÉRZÉSGÁTLÓ MATRIX ELŐKÉSZÍTÉSE



- 1. lépés:** Töltsön steril sóoldatot/trombint tartalmazó steril oldatot a steril folyadékátadó pohárba. Szívja fel az összes steril oldatot a steril folyadékátadó pohárból az üres fecskendőbe.



- 2. lépés:** Csatlakoztassa a fecskendőket – Vegye le a kupakot a SURGISPON® porral előretöltött fecskendőről, és csatlakoztassa ezt a fecskendőt a steril oldatot tartalmazó steril fecskendőhöz a Luer csatlakozó segítségével.



- 3. lépés:** Keverje össze a fecskendők tartalmát – Kezdje el a keverést úgy, hogy a steril oldatot a SURGISPON® porral előretöltött fecskendőbe nyomja. Folytassa az oldat fecskendők közötti átpumpálását, amíg az összes komponens alaposan összekeveredik és a konzisztencia egyenletes lesz.



- 4. lépés:** Csatlakoztassa az applikátor hegyét, hogy a termék készen álljon a klinikai használatra.



SURGISPON® PUTTY

A SURGISPON® ABSORBÁLHATÓ VÉRZÉSGÁTLÓ ZSELATIN SZIVACSPOR száraz formában, vagy sóoldattal kevert paszta formájában is alkalmazható. A por és a folyadék arányának változtatásával különböző konzisztenciák és viszkozitási fokozatok érhetők el, ami optimális felhasználást tesz lehetővé szabálytalan szerkezetű felületeken, például csontokon, valamint szükség szerint bármilyen üreg vagy repedés kitöltésére.

FŐBB JELLEMZŐK

- Nagy rugalmasság, alkalmazkodóképesség és könnyű kezelhetőség
- A műtéti területnek megfelelően könnyen bármilyen formára alakítható
- Gyorsan, 2 percen belül elállítja a vérzést
- Magasan tisztított, gyógyszereszeti minőségű zselatinból készül
- Nem okoz csontnyílást, mint a hagyományos csontviaszok
- Kézzel vagy hagyományos fecskendővel is felvihető a nehezen elérhető területekre
- Csökkenti azt az időt, amely alatt a sebésznek vissza kell térnie a vágott csontfelületekhez a vérzés elállításához
- Gyors és bevált vérzéscsillapítás a nehezen elérhető területeken és a szivárgó szivacsos csontok esetén
- pH-semleges – gyógyszerekkel kombinálható
- Nincs kapszulaképződés kockázata
- Teljesen lebomlik 4 héten belül
- Magas szintű betegkomfort – a helyén hagyható.

Rendelési információk az utolsó oldalon található

HOL HASZNÁLHATÓ

Sternotómia és kraniotómia során – szabálytalan szerkezetű területeken, például csontokon, valamint nehezen elérhető területeken, például üregekben vagy repedésekben, a vénás és arterioláris vérzés csillapítására.



GYAKORI SEBÉSZETI ALKALMAZÁSOK

• Általános

• Zsigeri és transzplantációs sebészet

• Szívsebészet

• Ér- és kardiorakális sebészet

• Ortopédiai és traumatológiai

• Idegsebészet

• Gerincsebészet

• Daganatsebészet

• Plasztikai

• Mellsebészet

• Nőgyógyászat és császármetszés


• Száj- és állcsontsebészet

• Fül-orr-

• Minimálisan invazív és robotasszisztált

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK


Termékazonosító	Terméknév	Súly/térfogat	Darabszám dobozonként
SSP-01B	BELLOW POR	1 g	6
SSP-02B	BELLOW POR	2 g	6
SSP-03B	BELLOW POR	3 g	6
SSP-05B	BELLOW POR	5 g	6
SSP-PS06KIT	POR KÉSZLET	550 mg/6 ml*	1
SSP-PS10KIT	POR KÉSZLET	1 g/10 ml*	1
* Az elkészítés után kapható mennyiség			
SSP-01	POR	1 g	6
SSP-03	POR	3 g	1
SSP-05	POR	5 g	1

 A-504, Swatīñīty, Nr. Shan tīpura Circle, SP Ring Road, Ahmedabad, Gujarat-380058,

 215/216, Mahagujarat Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat-382213, India.

 +91-951 290 3131  +91-951 288 3131

 marketing1@aegis-lifesciences.com
aegis.lifesciences@gmail.com

 www.aegis-lifesciences.com



BROCHÚRA



WEBOLDA



YOUTUBE

Important: Please refer Instructions for Use (IFU) for complete instructions, contraindications, warnings and precautions.

AL/BRC/SSPP/01/R7| Dátum: